

GUIDE SIMPLIFIÉ D'UTILISATION DU CHRONOS

Comment procéder à une désinfection de haut niveau avec CHRONOS ?

(Conformément aux recommandations du ministère de la santé - mars 2019)



Ôter délicatement le protège-sonde et essuyer le gel restant avec un papier à usage unique (absorbant non abrasif)




Nettoyer la sonde par essuyage avec 1 lingette détergente



Suspendre délicatement la sonde dans l'enceinte en plaçant sa bague dans le réceptacle prévu à cet effet



Placer le câble de sonde dans l'ouverture latérale de l'enceinte pour éviter tout pincement

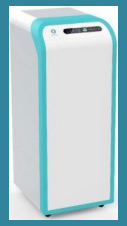

Fermer la porte jusqu'à entendre le "clic" du verrouillage



lancer le cycle de désinfection en appuyant sur l'unique bouton lancement confirmé par un son

FIN DU CYCLE


Une musique retentit
L'affichage indique "CYCLE OK"

La sonde peut être utilisée immédiatement ou dans un délai de 1 heure maximum si celle-ci est restée stockée dans le Chronos porte fermée, au-delà de ce délai, un cycle devra être effectué avant utilisation de la sonde.

Nettoyage extérieur du CHRONOS = à l'aide d'une lingette imprégnée ou d'un produit de surface.

Nettoyage intérieur du CHRONOS = chiffon doux qualité optique avec solution hydroalcoolique.

Une diode en façade témoigne du statut désinfecté ou non de la sonde présente dans l'enceinte

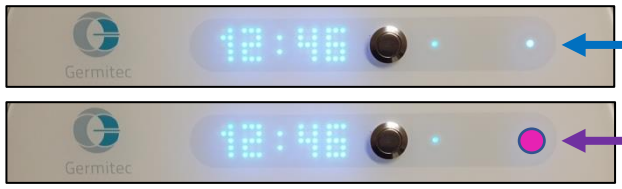

BLEUE → **Sonde prête à l'usage**

VIOLETTE → **Effectuer un cycle de nettoyage**



Seules les sondes équipées de bagues Germitec peuvent être placées et reconnues dans l'automate

Ce manuel simplifié ne se substitue pas au manuel utilisateur fourni à la livraison de l'appareil. Avant d'utiliser le système de désinfection Hypernova Chronos, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec la machine lors de la livraison.

Germitec

Pour toute question concernant le matériel, son utilisation, sa maintenance, une panne ou sa fin de vie, veuillez contacter votre correspondant SAV Germitec 01.49.87.18.00