UMONIUM38® Neutralis Tissues

Lingettes de désinfection de haut niveau

Pour sondes endocavitaires et standards





laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

ECO RESPONSABLE

Pourquoi **GE Healthcare** vous propose de choisir les lingettes **Neutralis Tissues ?**

BIOCOMPATIBILITÉ[1]

- Formule respectueuse pour le patient, l'environnement et l'opérateur (pas de nécessité d'EPI)
- Aucun composant CMR (carcinogène, mutagène, reprotoxique)
- PH neutre : non corrosif

SÉCURITÉ

- Aucun risque pour les cellules embryonnaires[2]
- Aucune incidence sur les spermatozoïdes[3]
- Utilisation au sein d'environnements sensibles (établissements PMA/FIV)

1. Test d'hémolyse ISO 10993-4, EN-ISO 10993-10, tests de court terme OECD 471
2. Validation avec le test Mouse Embryo Assay
3. Validation avec le test Human Sperm Survival Assay
4. Test validé selon la norme ASTM2967-15



ÉCONOMIQUE

- Nécessite seulement deux lingettes : une pour le nettoyage et une pour la désinfection
- Rapide : agit dès 5 secondes[4]
- Désinfection de la sonde d'échographie et de son environnement
- 3m² de surface peuvent être désinfecté avec une lingette
- Valable 3 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette

ÉCORESPONSABILITÉ

- Liquide d'imprégnation biodégradable
- Grâce à son composant : la pulpe de bois, les lingettes sont résistantes, confortables au toucher et sans odeur

EFFICACITÉ

- Désinfection de haut niveau : Bactéricide, Mycobactéricide, Fongicide, Virucide, Sporicide

Normes européennes
EN16615, EN14561, EN14562, EN14563, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348
Norme américaine
ASTM-2967-15

- Compatible avec les sondes GE endocavitaires et standards

Procédure de désinfection de haut niveau
pour sonde d'échographie rigide avec gaine


gehealthcare.com

©2020 General Electric Company–Tous droits réservés. General Electric Company se réserve le droit de modifier les spécifications et les caractéristiques de ce document ou de cesser le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE pour obtenir les dernières informations. GE, le monogramme GE, sont des marques commerciales de General Electric Company.
UMONIUM38® est une marque commerciale du Laboratoire Huckert's International. Les marques de commerce de tiers restent leur propriété. General Healthcare, division de General Electric Company.


Application : Produit destiné à être utilisé pour la désinfection de surface de dispositifs médicaux.
La solution d'imprégnation est issue d'une solution concentrée de classe médicale IIb.
Classe du produit : IIa.
Organisme notifié : CE1639.
Fabricant : Laboratoire Huckert's International.

Toujours consulter l'étiquette et les informations fournies par le fabricant avant toute utilisation.
Dernière révision : Juillet 2020
JB83060FR

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION AU NETTOYAGE

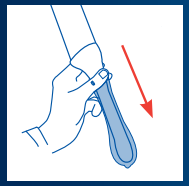


Enlever la gaine de protection* et observer toute anomalie visible (déchirure, ...).

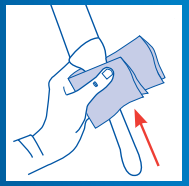


Essuyer la sonde avec une **lingette sèche à usage unique** (ou une compresse en non tissé) de l'extrémité à la prise pour rechercher la présence de souillures.

ÉTAPE 2 : NETTOYAGE

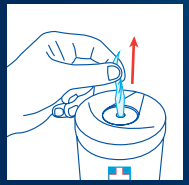


Prendre une lingette humide.

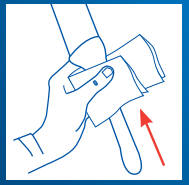


Essuyer soigneusement la sonde de l'extrémité à la prise afin d'éliminer toute salissure. Ne pas oublier la poignée.

ÉTAPE 3 : DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

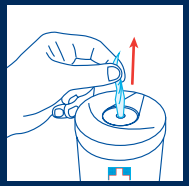

Prendre une lingette humide.

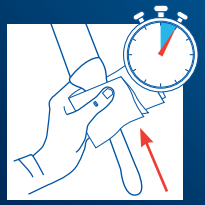

Essuyer soigneusement la sonde de l'extrémité à la prise pendant **5 secondes**.

Laisser sécher la sonde.**



** L'utilisation d'une gaine de protection est obligatoire pour les sondes endovaginales et endorectales (CSS N°9446 - Mai 2019). Respecter les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains et du port des gants lors de l'utilisation avec gaine de protection.*
*** Virucidie validée selon EN14476 en 10 minutes en conditions sales.*
Bactéricidie, Fongicidie, Mycobactéricidie, Sporicidie validées en 5 secondes selon ASTM-2967-15 et 1 minute selon EN16615.
Ensemble des normes Européennes validées en conditions propres et sales : EN14561, 14562, 14563, 13727, 13624, 14476, 14348.